



## Emozione, Stile ed Eleganza.

Dall'esperienza Zanni nasce oggi **EXCELSA**, il risultato di ricerche ed innovazioni nel settore estetico: un'eccellenza tutta made in Italy. Beauty, wellness, tecnologia e design si incontrano per dar vita al nuovo modo di fare estetica. **EXCELSA** è destinata al centro estetico di alto livello per le sue caratteristiche altamente performanti e per il suo design. **C FREQUENCY**, grazie alla sua azione efficacemente naturale, scolpisce, tonifica e rassoda viso e corpo in modo fisiologico e naturale.

## Emotion, Style and Elegance.

*From the experience of the Zanni Team, we have today the **EXCELSA** Line, as a result of scientific research and innovation in aesthetics: a "made in Italy" greatness. Beauty, Wellbeing, Technology and Design. They have all met to give life to a new way of making Beauty. **EXCELSA** Products are intended for high class Beauty Centres for their highly performing features and their notable design. **C FREQUENCY** Equipment has a naturally effective action and sculpts, invigorates and tones up face and body in a physiological and simple way.*

# EXCELSA



## EXCELSA


il nuovo modo di fare estetica  
MADE IN ITALY

EXCELSA è una divisione di ZANNI - PODOSPECIAL ITALY srl

51013 Chiesina Uzzanese (PT) Via delle Corti, 65/69 - tel. 0572.445.415 - 445.399 - fax 0572.444.746 Numero Verde 800-017273  
info@excelsaitaly.it - www.excelsaitaly.it

**C FREQUENCY**  
tecnologie di bellezza



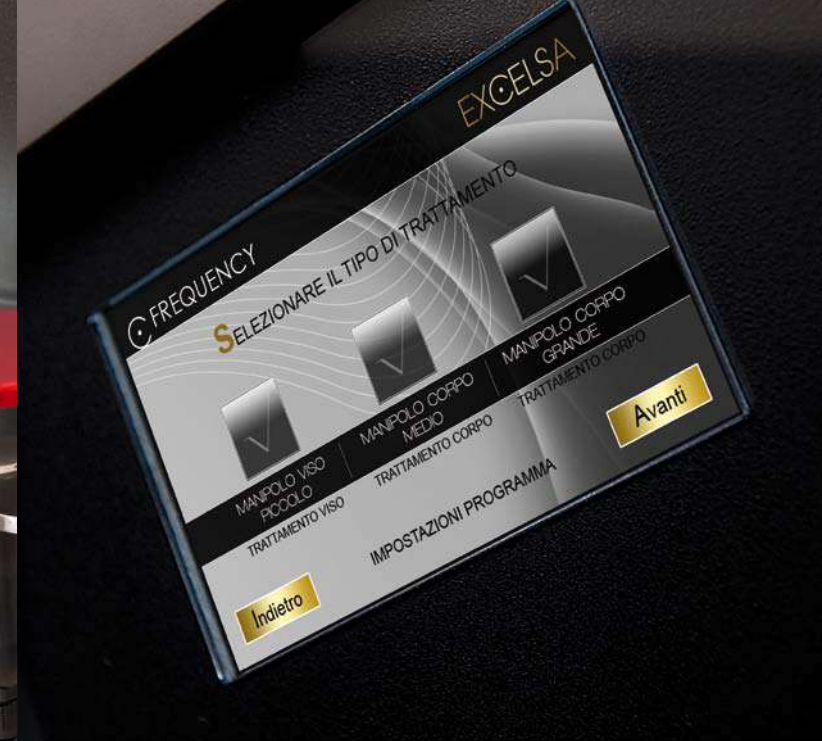

## C FREQUENCY

### MECCANISMO

Azione semplice ed efficace: ripristinare il metabolismo ed i meccanismi di riparazione. Una cute tonica e soda deve la propria freschezza alla intensa attività di ripristino per far fronte a tutti i processi di invecchiamento. Qualsiasi azione fisiologica necessita di energia ed ossigeno: le pelli mancano esattamente di questi elementi.

**C FREQUENCY** apporta energia biodisponibile, stimola la vascolarizzazione cutanea, migliora il microcircolo, richiama quanto più possibile sangue nelle zone ipovascolarizzate e mobilita le riserve energetiche depositate. Sangue significa apporto di nutrienti ed ossigeno, il comburente naturale ed indispensabile per tutte le attività cellulari incluso contrastare l'invecchiamento cutaneo e demolire i lipidi.

### OBIETTIVI

**Scolpire:** ti permette di definire e controllare adiposità localizzate, cuscinetti e tutti i tipi di cellulite.

**Tonicare:** la forte azione antiage data da una sferzata di nuova energia, dona vitalità ai tessuti atonici e sofferenti.

**Rassodare:** La facilitazione del ripristino della produzione delle proteine di sostegno come collagene ed elastina porta al naturale spianamento di rughe e pelli flaccide grazie all'effetto riempitivo endogeno.

### RISULTATI

**Superfici lisce:** Miglioramento evidente degli inestetismi legati a cellulite ed adiposità.

**Cute turgida:** tessuti vitalizzati.

**Pelli toniche:** rughe e pelli flaccide rassodate.

## C FREQUENCY

### MECHANISM

*Simple and effective action: re-establishing metabolism and repairing skin. You'll have a tonic, compact and fresh skin if an intense repairing action is carried out to face the ageing process. All physiological actions need energy and oxygen: skin usually lacks these very elements.*

**C FREQUENCY** Equipment produces bio-energy, stimulates skin vascularization, improves micro-circulation, attracts the most possible quantity of blood to the hypo-vascularized sites and mobilizes the deposited energy reserves. Blood means supply of nourishing substances and oxygen, the natural and absolutely necessary comburent for all the cell activities including skin ageing contrasting and lipid demolition.

### PURPOSES

**Sculpting action:** it permits to delineate and control any localized adiposity, fat pads and all types of cellulite.

**Toning-up action:** its strong anti-ageing action gives a stinging blow of new energy and a lot of vigour to non-tonic and pain-stricken tissues.

**Hardening action:** through an easier re-establishment of the production of supporting proteins such as collagen and elastin, you can obtain a natural smoothing of wrinkles and flabby skin, thanks to the endogenous and filling effect.

### RESULTS

**Smooth skin:** evident improvement of the unaesthetic effects of cellulite and adiposity.

**Firm and healthy skin:** revitalized tissues.

**Tonic skin:** wrinkles and flabby skins finally toned-up.

**C FREQUENCY** è dotata di tre manipoli di differenti dimensioni.

Il flusso di energia erogato, genera una ipertermia in assoluta tranquillità ed il cliente percepisce soltanto un gradevole, dolce tepore. Il calore indotto è stato studiato per ottenere il massimo dell'efficacia nel totale rispetto della sicurezza. Il lento movimento del manipolo, favorito dallo scorrimento del cosmetico usato, consente di effettuare anche un massaggio endodermico per un risultato ancora più efficiente.

**C FREQUENCY** Equipment is supplied with three handles of different sizes.

The supplied energy flow generates a very safe hyperthermia and the client only feels a pleasant warmth. The produced warmth has the function of obtaining the greatest effectiveness of the treatment in a total respect of safety. The slow movement of the handle, together with the flowing of the used treatment product, permits to carry out an endodermic massage and therefore obtain a more effective result.



**C FREQUENCY** esplica la sua azione con un sistema innovativo che prevede la generazione di un campo termomagnetico pulsato positivo ad 1Mhz che è in grado di trasferire la propria energia la quale viene a sua volta trasformata in calore endogeno per effetto joule. Il campo termomagnetico viene generato da un manipolo capace di concentrare la sua azione in punti specifici poiché non sono necessari elettrodi di riferimento.

L'energia convogliata in un fascio energetico consente di modellare, definire e tonificare le aree trattate in modo concentrato e mirato.

**C FREQUENCY** Equipment carries out its action innovatively and leads to the creation of a positive 1Mhz pulsed thermal-magnetic field: this is able to transfer its energy, which, in its turn, is then transformed into endogenous warmth by joule effect. The thermal-magnetic field is generated by a handle that can concentrate its action to specific areas, as no reference electrodes are necessary.

The energy, thus directed to a bundle of energy, permits to mould, define and invigorate the treated areas in a concentrated and focused way.

L'elettronica di gestione è stata studiata per garantire l'assoluta sicurezza e permette di impostare i tempi e l'intensità dei trattamenti. Il comodo schermo con tecnologia touch permette la gestione a sfioramento di tutte le funzioni in modo ergonomico ed intuitivo.

**C FREQUENCY** è studiata per essere sempre al passo con i tempi e con le leggi essendo possibile intervenire su qualsiasi parametro.

The electronic control of the equipment was developed to grant an absolute safety and allows you to set the timing and the intensity of the treatments. The easy touch panel permits to manage the equipment by just touching on and to control all functions ergonomically and intuitively.

**C FREQUENCY** Equipment was developed to be always updated and in the forefront, both technically and legally, as all parameters can be adjusted at any time.

### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE

Manipoli in dotazione: viso, décolleté e corpo

POTENZA MAX ALLA SONDA

Sonda 1 = 15W max

Sonda 2 = 28W max

Sonda 3 = 35W max

ALIMENTAZIONE Mediante alimentatore interno

EN 60601, 12V DC

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 220V ac

MAX POTENZA ASSORBITA 90W ca

N° USCITE 3 mediante e testine di applicazione a massaggio

DIMENSIONI Apparecchiatura: cm P47 x L40 x H152

PESO: 19 Kg ca

Apparecchiatura conforme alla legge 1/1990 e 110/2011

Excelsa Ti lascia solo il bello del trattamento.

### CARATTERISTICHE

- Design innovativo
- Touch screen
- 1 solo programma
- Facilità d'uso
- C FREQUENCY parte sempre da zero potenza
- Silenziosità
- Ipertermia controllata
- Rialzo termico moderato
- Manipolo unico
- Tutti i manipoli sono connessi simultaneamente al Macchinario
- Aggiornamenti software

### FEATURES

- Innovative Design
- Touch screen
- 1 single program
- Easy to use
- C FREQUENCY Equipment always starts from power Zero
- No noise
- Controlled hyperthermia
- Moderate thermal increase
- Single handle
- All handles are connected to the machine simultaneously
- Software updating

### BENEFICI CENTRO

- Diversificazione
- Comandi intuitivi e veloci
- Semplicità e rapidità di utilizzo
- Zero tempo di apprendimento e inutile la consultazione continua di manuali d'uso.
- Zero errori accidentali
- Nessun rumore molesto
- Offrire trattamenti sicuri
- Possibilità di eseguire movimenti / massaggi lenti
- Focalizzazione del trattamento
- Rapidità di sostituzione manipolo
- Macchina sempre al passo con i tempi

### ADVANTAGES for BEAUTY CENTRES

- Diversification
- Direct and quick controls
- Simple and rapid use
- No training time and no need to consult the handbook.
- No accidental mistakes
- No troublesome noise
- You can offer safe treatments
- Possibility of carrying out slow movements / massages
- Focused treatment
- Quick replacement of the handle
- The equipment is always updated

### SIZES AND FEATURES

Handles supplied with the equipment: face, neck and

shoulders, body

MAX. POWER AT TUBE

Tube 1 = 15W max

Tube 2 = 28W max

Tube 3 = 35W max

FEED: by means of an internal feeder (EN 60601, 12V DC)

FEEDING POWER: a.c. 220V

MAX. ABSORBED POWER: a.c. 90W

3 EXITS by means of application heads for the massage

SIZES of the Equipment: cm 47 (width) x cm 40 (length) x cm 152 (height)

WEIGHT: 19 Kg approximately

Equipment complying with 1/1990 and 110/2011

Excelsa It leaves you just the pleasure of the treatment

### BENEFICI CLIENTE

- Percezione innovazione ed eleganza
- Percezione di professionalità
- Zero tempi di attesa
- Percezione di competenza
- Incremento termico graduale
- Totale relax
- Rispetto della fisiologia
- Trattamento gradevole
- Sensazione di tepore solo sulla zona trattata
- Sensazione di dinamismo
- Trattamenti sempre all'avanguardia

### ADVANTAGES for CLIENTS

- Clear evidence of innovation and elegance
- Clear evidence of professionalism
- No waiting time
- Clear evidence of skill
- Gradual thermal increase
- Total relax
- Respect of physiology
- Pleasant treatment
- Warmth sensation on the treated area only
- Sensation of dynamism
- Treatments are very advanced